



l'Assurance Maladie

LE MODE D'EMPLOI

Vous avez reçu une lettre d'invitation munie de 2 étiquettes autocollantes avec votre numéro de NIR. Dans l'enveloppe du test, vous trouverez une fiche d'identification. Collez l'étiquette à la place réservée sur la fiche d'identification. Dans l'étui à 3 étapes, vous trouverez un tube, le test à domicile. Remplissez la date du test sur l'autre étiquette avec votre NIR et collez-la bien droite et à plat sur le côté du tube sans code barre.

Dévissez le bouchon vert du test et mettez le bout de la tige à 4 endroits différents de vos selles.

Il suffit d'une petite quantité, sans excès, pour pouvoir analyser les selles.

Avant d'effectuer le test

Prenez les deux étiquettes fournies avec la lettre d'invitation et contrôlez-les bien. Si vous n'avez pas reçu d'étiquettes ou si les étiquettes fournies ne sont pas correctes, vous pouvez également utiliser l'étiquette vierge de la fiche d'identification. Collez l'étiquette avec votre numéro NIR sur l'endroit réservé sur la fiche d'identification. Collez ensuite l'étiquette avec le code barre de votre NIR et la date de prélèvement remplie bien droit sur le tube côté plat ou il n'y a pas de code barre. Vérifier que votre fiche d'identification est correctement remplie avec:

- Votre information personnelle
- Votre numéro NIR (étiquette)
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse e-mail
- Le cachet de votre médecin traitant
- La date de consultation
- La date du prélèvement des selles




Vidéo d'instruction


Si vous voulez, vous pouvez également regarder les instructions sur internet à l'adresse: www.123TAD.fr (1, 2, 3 Test à Domicile). Sur ce site, vous trouvez ainsi des liens importants avec plus d'informations sur le dépistage du cancer de l'intestin. Si vous avez un scanner QR sur votre mobile, vous pouvez également scanner le code QR.




Comment faire le test?

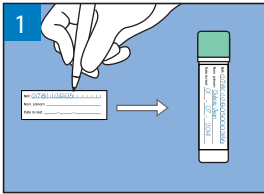


Collez l'étiquette avec le code barre de votre NIR et la date de prélèvement remplie bien droit sur le tube côté plat ou il n'y a pas de code barre.

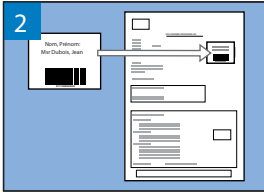


Collez l'étiquette avec votre numéro NIR sur l'endroit réservé sur la fiche d'identification. Vérifiez que votre fiche d'identification est correctement remplie.

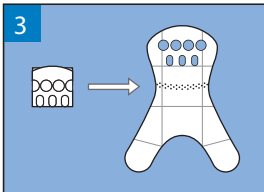

Dépliez le dispositif de recueil des selles et enlevez les 3 petits papiers de protection des autocollants.

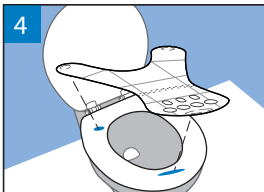


Collez le dispositif sur 3 points de la lunette de vos toilettes avec les petits trous devant, selon l'image.

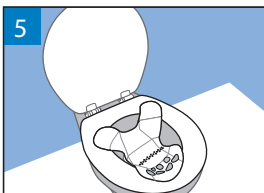


Poussez le papier légèrement afin de former un petit creux au milieu derrière les trous.

Une fois le papier installé, allez à la selle.

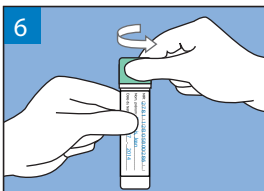


Dévissez ensuite le bouchon vert du test. Vous trouverez dans le bouchon une tige avec des rainures.

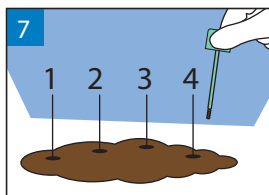


Mettez le bout de la tige à quatre endroits différents des selles de façon à avoir juste une petite quantité de selle sur le bout de la tige.


Une petite quantité est suffisante pour l'analyse. S'il y a trop de selle, le test est inutilisable.

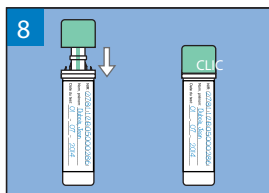

Mettez la tige dans le tube et revissez-le bien. La tige sera placée dans le liquide du tube. Le liquide pourrait se troubler. Ceci est normal.

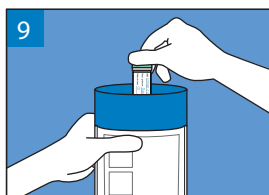

Vérifiez bien que vous avez collé la petite étiquette avec le NIR et la date sur le tube et mettez le tube dans le petit sachet avec la bande bleue. Scellez le petit sachet en enlevant le papier de la bande adhésive et pincez-le fermement.

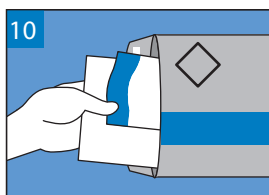

Vérifiez encore une dernière fois que vous avez bien complété la fiche d'identification et mettez-la avec le petit sachet du tube dans l'enveloppe de retour argentée marquée UN3373. Scellez-la bien en enlevant le petit papier du ruban adhésif et pincez les deux cotés ensemble.



Jusqu'au moment de l'envoi, gardez l'enveloppe avec le prélèvement bien scellé dans le réfrigérateur.



Mettez l'enveloppe dans la boîte à lettre de la Poste pour l'envoyer dans les 24h après avoir effectué le test. Vous n'avez pas besoin d'affranchir l'enveloppe.

Important

- Vous ne pouvez utiliser le test qu'une seule fois.
- Envoyez le tube dans l'enveloppe de retour argenté sans oublier la fiche d'identification complétée.
- Le test est uniquement pour les personnes de la population ciblée qui sont invitées à participer à ce programme national.
- Jusqu'au moment du test, conservez le test à une température entre 2 et 30 degrés Celsius.
- Envoyez l'enveloppe uniquement pendant les jours ouvrables de la Poste et pas avant le weekend ou jour férié.

Questions fréquentes

Combien de temps puis-je utiliser le test?

La date d'expiration est précisée sur le tube (mois / année).

Pourquoi dois-je envoyer l'enveloppe uniquement aux jours ouvrables de la poste et pas juste avant le weekend et jour férié?

De cette manière, le délai entre l'envoi du test et l'analyse restera le plus court possible afin d'obtenir le meilleur résultat.

J'ai perdu le tube/ le tube est abîmé, que dois-je faire?

Si vous avez perdu le tube de votre kit de dépistage, prenez contact avec votre médecin traitant pour recevoir un nouveau kit de dépistage.

J'ai fait une erreur, que dois-je faire?

Si vous avez fait une erreur avec le tube ou une erreur avec le recueil de selle, prenez contact avec votre médecin traitant.

Pourquoi faut-il garder le prélèvement dans le réfrigérateur?

S'il y a du sang dans vos selles, nous pourrions mieux le détecter quand le prélèvement a été gardé au frais.

Où pourrais-je trouver plus d'information?

Pour toute information complémentaire sur le programme français du dépistage du cancer colorectal, vous pouvez visiter le site de l'INCa : www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal



Information

Le dépistage du cancer colorectal, qui représente la deuxième cause de mortalité par cancer en France, fait l'objet d'un programme national organisé par les pouvoirs publics. Tous les deux ans, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont invités à réaliser un test de dépistage remis par leur médecin traitant.
www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal